
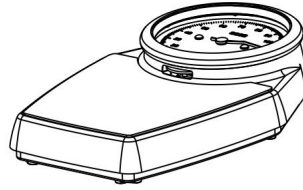


seca 761
seca 750/760
seca 762

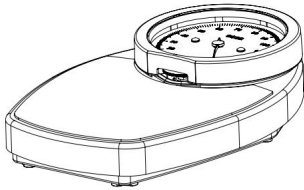

SATURS

1. Ierīces apraksts	3	4.4 Svaru izlīdzināšana	11 5.
1.1 Paredzētais lietojums	3	Svēršana	11 5.1 Displeja
1.2 Funkcionālais apraksts	3 1.3	regulēšana	11 5.2 Svēršanas
Lietotāja kvalifikācija	3 2. Drošības	veikšana	12
informācija	4	6. Higiēniska atkārtota apstrāde	12 6.1
2.1 Drošības informācija šajā		Tīrīšana	12 Korpusa
rokasgrāmatā	4 2.2	tīrīšana	12 Skalas gredzena
Pamata drošības pasākumi	4 Instrumenta	un skalas tīrīšana	13 6.2
lietošana	4 Infekciju	Dezinfekcija	14 6.3
novēršana	5 Traumu	Sterilizācija	14
novēršana	5 Ierīces	7. Funkciju pārbaude	14
bojājumu		8. Ko man darīt, ja ...?	15
novēršana	6	9. Apkope/Atkārtota kalibrēšana	15
Mērījumu rezultātu		9.1 Informācija par apkopi (seca	
apstrāde	6	750/760/762)	15
Iepakojuma materiāla		9.2 Informācija par atkārtotu kalibrēšanu	
apstrāde	7	(seca 761)	16
3. Pārskats	8	10. Tehniskie dati	16
3.1 Vadības ierīces/funkcijas	8 3.2	10.1 Vispārīgi tehniskie dati	16 10.2 Svēršanas
Informācija par ierīci un		tehniskie dati	17 10.3 Konvertēšanas
Datu plāksnīte	8 3.3	rīks	18
Informācija uz iepakojuma	9 4. Pirms sākat	11. Utilizācija	18
darbu	10 4.1 Bloķēšanas tapas	12. Garantija	19
noņemšana	10 4.2 Transportēšanas	13. Atbilstības deklarācija	19
fiksatora noņemšana	10 4.3 Sienas starplikas		
uzstādīšana	10		

1. IERĪCES APRAKSTS

1.1 Paredzētais lietojums

Mehāniskie Seca plakanie svāri galvenokārt tiek izmantoti slimnīcās, medicīnas praksēs un stacionārās aprūpes iestādēs saskaņā ar valsts noteikumiem.

Svāri ir paredzēti tradicionālai svara noteikšanai un vispārējā uztura stāvokļa novērtēšanai; tie palīdz ārstēšanu uzraugošajam ārstam noteikt diagnozi vai izlemt par ārstēšanas kursu.

Tomēr, lai noteiktu precīzu diagnozi, ārstam papildus svara vērtības noteikšanai ir jānozīmē arī citi specifiski izmeklējumi, un jāņem vērā to rezultāti.

1.2 Funkcionālais apraksts

Ar mehāniskiem skalas svāriem svars tiek aprēķināts, izmantojot slodzes svāru sistēmu.

Pirms svēršanas nulles punktu var manuāli atiestatīt katru reizi, izmantojot regulēšanas ritenīti.

Kalibrēti svāri tiek piegādāti ar kg skalas.

Nekalibrēti svāri tiek piegādāti ar kg, lbs, kg/lbs vai kg/sts mērvienībām atkarībā no modeļa.

1.3 Lietotāja kvalifikācija

Ierīci drīkst lietot tikai veselības aprūpes speciālisti.

2. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

2.1 Drošības informācija šajā rokasgrāmatā

**BĪSTAMI!**

Lieto, lai apzīmētu ārkārtīgi bīstamu situāciju. Ja neievērosiet šo informāciju, radīsies nopietnas, neatgriezeniskas vai nāvējošas traumas.

**BRĪDINĀJUMS!**

Lieto, lai apzīmētu ārkārtīgi bīstamu situāciju. Ja neievērosiet šo informāciju, var rasties nopietni, neatgriezeniski vai nāvējoši savainojumi.

**UZMANĪBU!**

Lieto, lai apzīmētu bīstamu situāciju. Ja neievērosiet šo informāciju, var rasties viegli vai vidēji smagi savainojumi.

PAZIŅOJUMS!

Izmanto, lai identificētu iespējamu nepareizu ierīces lietošanu. Ja neievērosiet šo informāciju, jūs varat sabojāt ierīci vai mērījumu rezultāti var būt nepareizi.

PIEZĪME

Ietver papildu informāciju par ierīces lietošanu.

2.2 Pamata drošības pasākumi

Instrumenta lietošana • Lūdzu, ņemiet vērā šajā instrukcijā sniegto informāciju lietošanas instrukcija.

- Glabājiet lietošanas instrukciju drošā vietā. lietošanas instrukcija ir ierīces sastāvdaļa un tam jābūt pieejamam visu laiku.

**UZMANĪBU!**

Pacienta apdraudējums, ierīces bojājumi

Veiciet apkopi un turpmāku pārbaudi regulāri jāveic, kā aprakstīts šī dokumenta attiecīgajā sadaļā.

Tehniskas izmaiņas nedrīkst veikt ierīci. Ierīcē nav nekādu detaļas, kuras apkalpo lietotājs. Apkopi un remontu drīkst veikt tikai pilnvarots speciālists.

Seca servisa partneris. Servisa partnerus savā reģionā varat atrast vietnē www.seca.com vai nosūtīt e-pastu uz service@seca.com. Izmantojiet tikai oriģinālos

Seca piederumus un rezerves daļas, pretējā gadījumā Seca nepiešķirs nekādu garantiju.

Infekciju novēršana



BRĪDINĀJUMS!

Infekcijas risks

Regulāri higiēniski apstrādājiet svarus, kā aprakstīts šī dokumenta attiecīgajā sadaļā.

Pārliecinieties, ka pacientam nav infekcijas slimību.

Pārliecinieties, ka pacientam nav atvērtu brūces vai infekciozas ādas izmaiņas, kas var nonākt saskarē ar ierīci.

Traumu novēršana



BRĪDINĀJUMS!

Kritiena radītas

traumas Pārliecinieties, vai ierīce ir stingri novietota un līmenis.

Atbalstiet cilvēkus ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kad viņi uzkāpj uz svariem un nokāpj no

tiem. Izmantojiet šos svarus tikai pacientiem, kuri svēršanas laikā spēj paši nostāvēt. Pārliecinieties, ka pacients uzkāpj uz svēršanas platformas un nenokāpj no tās tieši pie malām.

Pārliecinieties, ka pacients uzkāpj uz svēršanas platformas un nokāpj no tās lēnām un droši.



BRĪDINĀJUMS!

Slidēšanas risks Pirms

pacienta uzkāpšanas uz svēršanas platformas pārliecinieties, vai tā ir sausa.

Pirms pacienta uzkāpšanas uz svēršanas platformas pārliecinieties, vai pacienta pēdas ir sausas.

Pārliecinieties, vai pacients uzkāpj uz svēršanas platformas un nokāpj no tās lēni un droši.

Izvairīšanās no ierīces bojājumiem

PAZIŅOJUMS!

Ierīces bojājumi

Uzmanieties, lai ierīce nenokristu.

Nepakļaujiet ierīci triecieniem vai citiem bojājumiem vibrācija.

Regulāri veiciet funkciju pārbaudes, kā norādīts aprakstīts attiecīgajā šī dokumenta sadaļā. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas pareizi.

Kodīgi mazgāšanas līdzekļi var sabojāt virsmas. Izmantojiet tikai mīkstu drānu, kas samitrināta ar maigas ziepju putas virsmu tīrīšanai ierīce.

Izmantojiet tikai jutīgām personām piemērotus dezinfekcijas līdzekļus. virsmām. Ir pieejami piemēroti dezinfekcijas līdzekļi. no specializētiem tirgotājiem.

Mērījumu
rezultātu apstrāde

BRĪDINĀJUMS!

Pacienta risks

Šī ierīce nav diagnostikas ierīce. Tā vienkārši palīdz ārstējošajam ārstam noteikt diagnozi.

Lai noteiktu precīzu diagnozi un uzsāktu terapeitiskus pasākumus, papildus svara noteikšanai jāveic arī mērķtiecīgāka
Ārstam ir jānosaka izmeklējumi, un to rezultāti ir jāņem vērā.

Par diagnozi un ārstēšanu atbild ārstējošais ārsts.



UZMANĪBU!

Pacienta risks

Lai izvairītos no nepareizas interpretācijas, medicīniskai lietošanai paredzēto testu rezultāti jāattēlo un jāizmanto tikai SI mērvienībās (svars: kilogrami, garums: metri).

Rezultātus izmantojiet tikai SI mērvienībās.

Mērījumu rezultātu izmantošana ne-SI sistēmās vienību uzturēšana ir tikai lietotāja atbildība.

Ja jūsu svāri nevar attēlot SI mērvienības, jūs var izmantot šajā dokumentā pieejamo konvertēšanas rīku.

PAZIŅOJUMS!

Nekonsekventi mērījumu rezultāti

Pirms saglabājat ar šo ierīci noteiktās mērījumu vērtības un izmantojat tās tālāk (piemēram, seca datorprogrammatūrā vai slimnīcas informācijas sistēmā) pārliecinieties, vai mērījumu vērtības ir ticamas.

Ja mērījumu vērtības tiek pārsūtītas uz seca datorprogrammatūra vai slimnīcas informācijas centrs pirms turpmākas lietošanas pārliecinieties, vai sistēma mērījumu vērtības ir ticamas un ir piešķirts pareizajam pacientam.

Iepakojuma materiāla apstrāde



BRĪDINĀJUMS!

Nosmakšanas risks

No plastmasas folijas (maisiņiem) izgatavots iepakojuma materiāls rada aizrīšanās risku.

Iepakojuma materiālu glabājiet bērniem nepieejamā vietā. bērni.

Ja oriģinālais iepakojuma materiāls ir bojāts var nebūt pieejams, izmantojiet tikai plastmasas maisiņus ar drošības caurumiem, lai samazinātu nosmakšanas risku. Ja iespējams, izmantojiet pārstrādājamus materiālus.



PIEZĪME

Saglabājiet oriģinālo iepakojuma materiālu turpmākai lietošanai (piemēram, atgriešanai apkopes veikšanai).



3. PĀRSKATS

3.1 Vadības ierīces/funkcijas

seca 750:

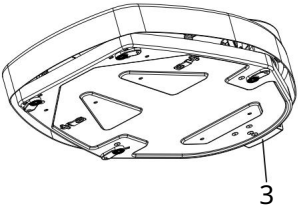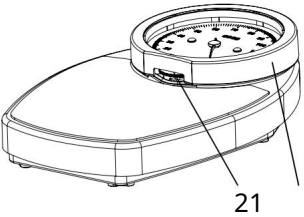

seca 760/761/762:

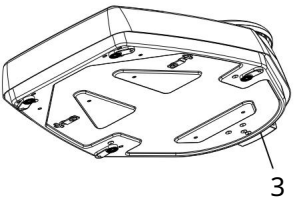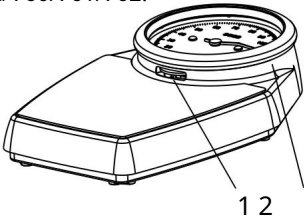

Nr. Vadības elements/funkcija	Funkcija
1	Regulēšanas ritenis Displeja regulēšanai.
2	Zvīņas gredzens • Aizsargā rādītāju un ciparnīcu • Var noņemt tīrīšanai (nevis seca 750)
3	Transportēšanas fiksators • Novērš jebkādu relatīvu kustību starp svēršanas elementiem platforma un korpusa apakšējā daļa laikā transports • Var izmantot kā sienas starpliķu.

3.2 Informācija uz ierīces un datu plāksnītes

Teksts/Simbols	Nozīme
Modelis	Modeļa numurs
Sērijas nr.	Sērijas numurs
	Ievērojiet lietošanas instrukcijas
e	Vērtība mērvienībās, ko izmanto skalas klasificēšanai un kalibrēšanai (kalibrēti modeļi)
d	Vērtība mērvienībās, kas norāda starpību starp divām secīgām displeja vērtībām
	III klases svāri saskaņā ar direktīvu 2014/31/ES

Teksts/Simbols	Nozīme •
	Svaru mērvienība (šeit: kg) • Svaru daļa zem minimālās slodzes: Tehnisku iemeslu dēļ šajā diapazonā nav iespējami jēgpilni mērījumu rezultāti. Ierīce atbilst ES standartiem un
	direktīvām. • M: Atbilstības marķējums saskaņā ar Direktīvu 2014/31/ES, kas reglamentē neautomātiskos svarus (verificēti modeļi). • 16: (Piemērs: 2016). Gads, kurā tika aizpildīta atbilstības deklarācija un uzklāts CE simbols (verificēts modelis). • 0102: Paziņotā iestāde metroloģijai (verificēti modeļi). • 0123: Paziņotā iestāde medicīnas produktiem.


3.3 Informācija uz iepakojuma

	Sargāt no mitruma
	Bultiņas norāda produkta augšdaļu. Pārvadāt un uzglabāt vertikālā stāvoklī.
	Trausls. Nemetiet un nenometiet.
	Pieļaujamā minimālā un maksimālā temperatūra transportēšanas un uzglabāšanas laikā
	Pieļaujamais minimālais un maksimālais mitrums transportēšanas un uzglabāšanas laikā
	Atveriet iepakojumu šeit
	Iepakojuma materiālu var utilizēt, izmantojot pārstrādes programmas.

4. PIRMS SĀKAT DARBU...


4.1 Fiksācijas tapas noņemšana

Klikšķis!

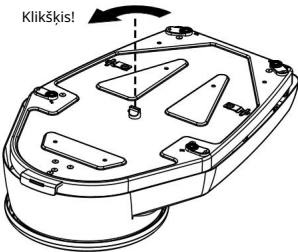

1. Pagrieziet fiksācijas tapu korpusa pamatnē a

ceturtdaļpagriezienu pretēji pulkstenrādītāja virzienam.

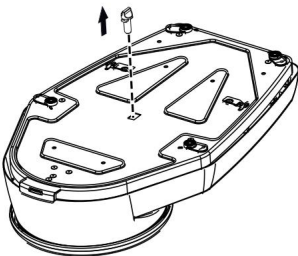


2. Izņemiet fiksācijas tapu.

PIEZĪME

Saglabājiet fiksācijas tapu, lai svarus varētu transportēt vēlāk.

4.2 Transportēšanas fiksatora noņemšana

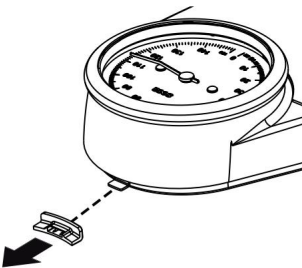

Noņemiet transportēšanas fiksatoru no apakšējās daļas mājokļa.


PIEZĪME:

Novietojiet transportēšanas fiksatoru drošā vietā, lai svarus varētu transportēt vēlāk.

Transportēšanas fiksatoru var izmantot kā sienas stiprinājumu starplikas (skatīt sadaļu "Sienas starplikas uzstādīšana").

4.3 Sienas starplikas uzstādīšana

Ja vēlaties novietot svarus tuvu sienai, iesakām izmantot transportēšanas fiksatoru (skatiet sadaļu "Transportēšanas fiksatora noņemšana") kā sienas starpliku. Tas neļauj svēršanas platformai pieskarties sienai un radīt nepareizu mērījumu rezultātu.

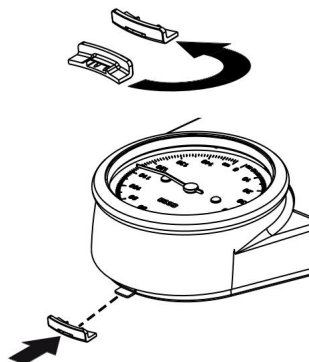

1. Novietojiet transportēšanas bloķētāju, kā parādīts blakus esošajā zīmējumā.
2. Piestipriniet transportēšanas fiksatoru ierīces apakšējai daļai. mājokļu.

4.4 Svaru izlīdzināšana

UZMANĪBU!

Nepareizs mērījums spēka šuntu dēļ

Mīksti grīdas segumi, piemēram, paklāji, var izraisīt nepareizus svara mērījumus. Novietojiet svarus tā, lai tikai to kājiņas atrastos saskare ar grīdu.

Novietojiet svarus uz stabilas, līdzenas virsmas.

5. SVĒRŠANA




UZMANĪBU!

Ķermeņa

traumas. Pirms katras lietošanas reizes veiciet darbības pārbaudi, kā aprakstīts sadaļā "Funkcionalitātes pārbaude" 35. lappusē.


5.1 Displeja regulēšana

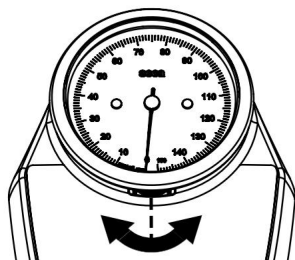

Lai iegūtu jēgpilnas mērījumu vērtības, pirms katras lietošanas reizes jāpārbauda, vai skalas rādītājs rāda "0".

1. Pārliecinieties, ka svāri nav noslogoti.
2. Pārbaudiet rādītāja pašreizējo pozīciju.
3. Pārvietojiet regulēšanas riteni tā, lai rādītājs būtu redzams "0".
 - Pagriezt pulksteņrādītāja virzienā: rādītājs pārvietojas pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
 - Pagriezt pretēji pulksteņrādītāja virzienam: rādītājs pārvietojas pulksteņrādītāja virzienā.

5.2 Svēršanas veikšana

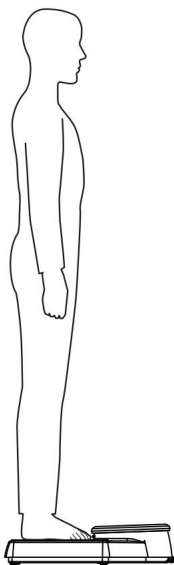

UZMANĪBU!

Pacienti var gūt traumas, ja viņi krīt. Cilvēki ar ierobežotu kustību amplitūdu var nokrist, mēģinot uzkāpt uz svariem vai nokāpt no tiem.

Atbalstiet cilvēkus ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kad viņi uzkāpj un nokāpj no svariem.

Šos svarus izmantojiet tikai pacientiem, kuri spēj lai svēršanas laikā varētu stāvēt paši.

1. Pārliecinieties, vai rādītājs rāda "0".
2. Palūdziet pacientam uzkāpt uz svariem un nekustēties.
3. Nolasiet izmērīto rezultātu.

PIEZĪME:

Ja jūsu svari rāda mērījumu vērtības tikai "mārciņās", varat izmantot konvertēšanas rīku 39. lappusē, lai konvertētu mērījumu vērtības uz kg vērtībām.

4. Palūdziet pacientam nokāpt no svariem.

6. HIGIĒNISKA PĀRSTRĀDE

PAZIŅOJUMS!

Ierīces bojājumi

Nepiemēroti mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi var sabojāt ierīces jutīgās virsmas.

Izmantojiet tikai dezinfekcijas līdzekļus bez hlora un spirta, kas ir īpaši piemēroti akrila virsmām.

loksnes un citas jutīgas virsmas (aktīvā viela: piemēram, kvaternārie amonija savienojumi).

Nelietojiet vaiņspirtu vai vazelīnu.

Izmantojiet tikai jutīgām personām piemērotus dezinfekcijas līdzekļus. virsmām. Ir pieejami piemēroti dezinfekcijas līdzekļi.


no specializētiem tirgotājiem.

6.1 Tīrīšana


Korpusa tīrīšana Izmantojiet mīkstu drānu, kas samitrināta ar maigām ziepju putām, lai notīriet ierīces virsmas.

Skalas gredzena un skalas tīrīšana

Lai iztīrītu svaru gredzena iekšpusi un svarus, to var noņemt no svēršanas platformas (nevis secā 750).

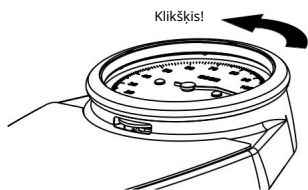

1. Pagrieziet skalas gredzenu pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

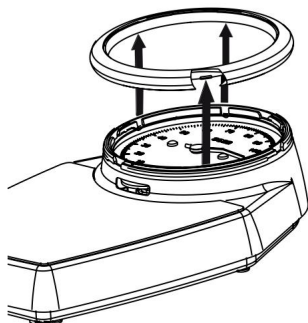


2. Noņemiet skalas gredzenu.

UZMANĪBU!

Ierīces bojājumi

Kad skalas gredzens ir noņemts, rādītājs un skala uz ierīces ir brīvi pieejami. Ja šīs daļas ir bojātas, nebūs iespējams iegūt jēgpilnus mērījumu rezultātus.


Pārbaudiet, vai rādītājs un skala nav tīrīšanas laikā ir bojāts.

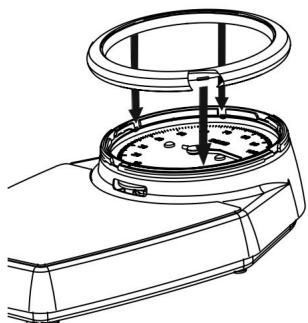

3. Notīriet šādas daļas ar mīkstu drānu samitrināts ar vieglu ziepjūdeni:

- Mērogs
- Skalas gredzena iekšpusē

4. Uzlieciet skalas gredzenu atpakaļ uz korpusa.

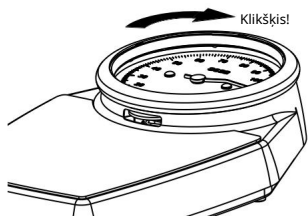

5. Pagrieziet skalas gredzenu pulksteņrādītāja virzienā, lai to atkārtoti nostiprinātu.

6.2 Dezinfekcija

1. Pārbaudiet, vai jūsu dezinfekcijas līdzeklis ir piemērots jutīgām personām virsmas un akrila loksnes.
2. Izpildiet dezinfekcijas līdzekļa norādījumus.
3. Regulāri dezinficējiet ierīci, izmantojot mīkstu drānu.
drānu, kas samitrināta ar piemērotu dezinfekcijas līdzekli.

Intervāls	Komponents
Pirms katra mērījuma, ja ir tiešs kontakts ar ādu	Svēršanas platforma
Pēc katra mērījuma, kas noticis tiešs kontakts ar ādu	Svēršanas platforma
Ja nepieciešams	Mēroga gredzens un skata lodziņš

6.3 Sterilizācija

Šo ierīci nedrīkst sterilizēt.

7. FUNKCIJU PĀRBAUDE

Pirms katras darbības veiciet funkcionālo pārbaudi.

Pilnīga funkcionālā pārbaude ietver:

- Vizuāla mehānisku bojājumu pārbaude
- Displeja vizuāla pārbaude un darbības pārbaude elementi
- Visu sadaļā parādīto vadības elementu darbības pārbaude "Pārskats"

Jā funkciju pārbaudes laikā atrodas kļūmes vai novirzes, vispirms mēģiniet novērst kļūmi, izmantojot sadaļas "Ko darīt, ja ...?" sniegtos norādījumus.

**UZMANĪBU!**

Ķermeņa traumas

Ja funkciju pārbaudes laikā atrodāt kļūmes vai novirzes, kuras nevarat novērst, izmantojot sadaļas "Ko darīt, ja ...?" norādījumus, ierīci nedrīkst lietot.

Ierīci remontējiet Seca servisā vai pilnvarots servisa partneris.

Jums jāievēro arī norādījumi, kas sniegti sadaļā "Apkope/Atkārtota kalibrēšana" 36. lappuse.

8. KO MAN DARĪT, JA ...?

Darbības traucējumi	Cēlonis/risinājums
... svāri neuzrāda svaru?	Ierīce nav gatava lietošanai - Noņemiet transportēšanas fiksatoru
... svāri neuzrāda nekādu ticamu svaru?	• Pirms svēršanas rādītājs nerāda "0" - Pielāgot displeju • Spēka šunts: svāri, piemēram, pieskaras sienai vai pacients atbalsta savu svaru pret sienu. - Pārvietojiet svarus prom no sienas - Izmantojiet transportēšanas fiksatoru kā sienas starpliku - Palūdziet pacientam bez palīdzības nostāties uz svāriem.

9. APKOPE/ATKALIBRĒŠANA

9.1 Informācija par apkopi (seca 750/760/762)

Produkts ir jāuzstāda uzmanīgi un regulāri jāapkopj. Atkarībā no svaru lietošanas biežuma mēs iesakām veikt apkopi ik pēc 3 līdz 5 minūtēm. gadi.

UZMANĪBU!

Nepareizi mērījumi sliktas apkopes rezultātā

Apkopi un remontu veiciet tikai pilnvarots servisa partneris.

Apkalpošanas partnerus savā reģionā varat atrast vietnē www.seca.com vai nosūtīt e-pastu uz service@seca.com.

9.2 Informācija par atkārtotu kalibrēšanu (761. sek.)

Pirms atkārtotas verifikācijas iesakām veikt ierīces apkopi.

PAZIŅOJUMS!
Nepareizi mērījumi sliktas apkopes rezultātā
Lūdzu,
apkopi un remontu veiciet tikai pilnvarots servisa
partneris.
Apkalpošanas partnerus savā reģionā varat atrast
vietnē www.seca.com vai nosūtīt e-pastu uz adresi
service@seca.com.

Ļaujiet pilnvarotam tehniķim veikt atkārtotu pārbaudi saskaņā
ar valsts tiesību aktiem.

Turpmāka verifikācija ir nepieciešama ikreiz, kad ir bojāta viena vai
vairākas verifikācijas plombas.

10. TEHNISKIE DATI

10.1 Vispārīgi tehniskie dati

Vispārīgi tehniskie dati	
seca 750 izmēri • Dziļums • Platums • Augstums	477 mm 317 mm 117 mm
Neto svars seca 750	aptuveni 3,5 kg
seca 760/761 izmēri • Dziļums • Platums • Augstums	470 mm 303 mm 118 mm
seca 762 izmēri • Dziļums • Platums • Augstums	470 mm 303 mm 118 mm
Neto svars seca 760/761/762	aptuveni 3,5 kg
Temperatūras diapazons • Darbība • Uzglabāšana • Transportēšana	+10 °C līdz +40 °C (50 °F līdz 104 °F) -10 °C līdz +65 °C (14 °F līdz 149 °F) -10 °C līdz +65 °C (14 °F līdz 149 °F)

Vispārīgi tehniskie dati	
Gaisa spiediens • Darbība • Uzglabāšana • Transports	700-1060 hPa 700-1060 hPa 700-1060 hPa
Mitrums • Darbība • Uzglabāšana • Transports	30-80 % bez kondensāta 0-95 % bez kondensāta 0-95 % bez kondensāta
Medicīniskā ierīce saskaņā ar Direktīva 93/42/EEK	I klase ar mērīšanas funkciju


10.2 Tehniskie dati, svēršana

Tehniskie dati, svēršana seca 761	
Kalibrēšana saskaņā ar Direktīva 2014/31/ES	III klase
Maksimālā slodze	150 kg
Minimālā slodze	10 kg
Izlaidumi	1 kg
Nulles regulēšanas diapazons	20 kg
Precizitāte sākotnējās kalibrēšanas laikā: • 10 kg līdz 50 kg • 50 kg līdz 150 kg	±0,5 kg ±1 kg

Tehniskie dati, svēršana seca 750/760/762	
Maksimālā slodze	150 kg / 320 mārciņas / 23 valdziņi
Minimālā slodze	10 kg / 20 mārciņas / 1 valdziņš
Graduācijas seca 750/760	1 kg / 1 mārciņa / 1 mārciņa
seca 762 izlaidumi	0,5 kg / 1 mārciņa / 1 mārciņa
Nulles regulēšanas diapazons	20 kg / 45 mārciņas / 3 valdziņi
Precizitāte: • 10 kg līdz 80 kg • 80 kg līdz 150 kg • No 9 līdz 80 kg • No 80 līdz 140 kg • No 1 valdziņa līdz 12 valdziņiem • No 12 valdziņiem līdz 23 valdziņiem	±1 kg ±1,25 % ±2,2 mārciņas ±1,25 % ±0,2 sts ±1,25 %

10.3 Konvertēšanas rīks

Daži modeļi attēlo mērījumu vērtības tikai "mārciņās". Šiem modeļiem izmantojiet tālāk norādīto konvertēšanas rīku, lai konvertētu mērījumu vērtības uz kg vērtībām.

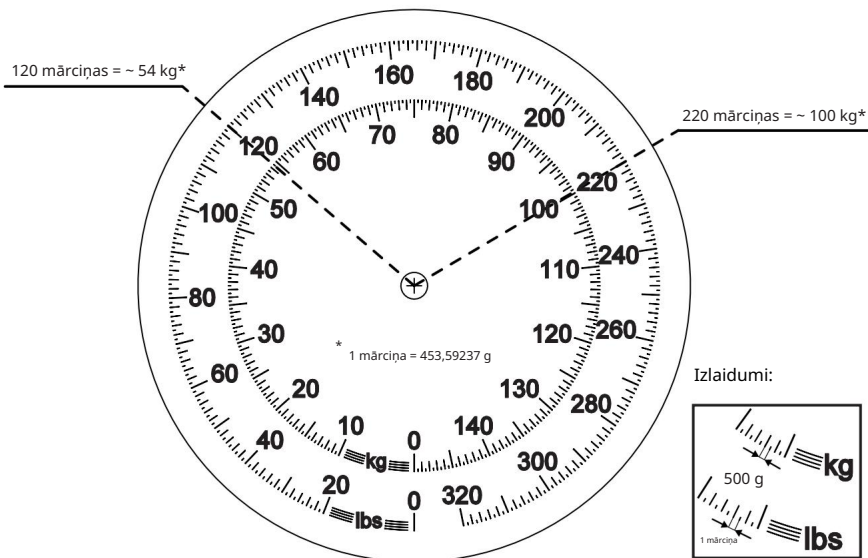

11. UTILIZĀCIJA

Šī ierīce ir izgatavota no augstas kvalitātes izejvielām, kuras var pārstrādāt. Atbrīvojieties no ierīces saskaņā ar jūsu valstī spēkā esošajiem vietējiem likumiem un noteikumiem.

12. GARANTĪJA

Mēs piedāvājam divu gadu garantiju no piegādes datuma defektiem, kas radušies materiālu defektu vai nekvalitatīvas apstrādes dēļ. Tas neattiecas uz visām kustīgajām daļām, piemēram, (uzlādējamām) baterijām, kabeļiem, barošanas blokiem utt. Defekti, uz kuriem attiecas garantija, klientiem tiek novērsti bez maksas, uzrādot pirkuma čeku. Citas prasības netiek pieņemtas.

Piegādes izmaksas abos virzienos sedz klients, ja ierīce neatrodas klienta telpās. Bojājumu gadījumā piegādes laikā garantijas prasības var iesniegt tikai tad, ja piegādei tika izmantots pilns oriģinālais iepakojums un svari iekšpusē bija nostiprināti tāpat kā oriģinālajā iepakojumā. Tāpēc saglabājiet visu iepakojumu.

Garantija zaudē spēku, ja ierīci atver personas, kuras secā nav skaidri pilnvarojis to darīt.

Garantijas prasību gadījumā lūdzam klientus, kas atrodas ārzemēs, sazināties tieši ar savu vietējo pārdošanas aģentu.

13. ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo seca gmbh & co. kg deklarē, ka produkts atbilst piemērojamo Eiropas direktīvu noteikumiem.

Pilnu atbilstības deklarāciju var atrast vietnē: www.seca.com.

